

UBIGEL DONNA

Trattamento delle sindromi genitourinarie femminili

Cos'è e come agisce

Ubigel Donna è un dispositivo medico a base di un complesso acido ialuronico e spermidina indicato nel trattamento delle sindromi genitourinarie femminili. L'acido ialuronico è un biopolimero fisiologico costituito da glicosaminoglicani tipici della matrice extracellulare. Idratandosi lega grandi quantità di acqua, come tale contribuisce all'integrità dei tessuti epitelio-connettivi. Il complesso rilascia spermidina in forma "sostenuta", tali da coadiuvare i fisiologici processi di rinnovamento. La spermidina è un metabolita essenziale alla fisiologia mediante regolazione dei processi cellulari vitali. È presente nei tessuti genitourinari, pur se può rappresentare un fattore scarso/limitante, laddove l'apporto esogeno diviene quindi "restitutivo" della condizione fisiologica. L'azione della spermidina crea condizioni microambientali di sollecitazione indotta sui meccanosensori cellulari. Tale modalità d'azione rievoca una sollecitazione micro-meccanica positiva (paragonabile quindi a una forma di ginnastica interna "soft") che conduce alla progressiva riduzione vulvare, uretrale e vaginale.

Indicazioni d'uso

Ubigel Donna migliora e sostiene il trofismo genitourinario con elevata capacità bioadesiva sui tessuti, formando un film trofico capace di supportare la ricompattazione degli strati epiteliali e connettivi. Ubigel Donna aderisce ai tessuti genitourinari riducendo progressivamente il disturbo percepito. La natura del prodotto ne consente l'uso in associazione ai trattamenti mirati alle infezioni vaginali. Da utilizzare in caso di:

· Vulvodinia

Istruzioni

Applicare a giorni alterni per 4 settimane. Dopo una settimana di pausa, riprendere con un'applicazione ogni 3 giorni per altre 4 settimane. Sospendere l'applicazione in caso di risoluzione anticipata della sintomatologia. Si consiglia l'uso saltuario con applicazioni sporadiche per mantenerne i benefici ottenuti al termine del trattamento.

Avvertenze

Il prodotto è da intendersi esclusivamente per uso locale, non utilizzare per una via di somministrazione differente da quella indicata nel presente foglietto illustrativo. Non utilizzare in donne in gravidanza senza aver prima consultato un medico. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Non utilizzare il tubetto se risulta rotto o danneggiato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura tra 4°C e 30°C. Dopo l'utilizzo richiudere il tubetto.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti. In qualche caso è stata segnalata una sensazione di pizzicore (pricking), che tende a scomparire dopo le prime applicazioni.

Interazioni

Il prodotto è compatibile con i normali profilattici in lattice.

Ingredienti

Acqua, spermidina-ialuronato, alcol benzilico, benzoato di sodio, fenossietanolo, acido citrico.

Formato


Tubo: 50 ml e FL OZ 1.69

Indicazioni e modalità d'uso


In caso di vulvodinia

Ubigel Donna è indicato nella sintomatologia vulvare di ipersensibilità e dolore al contatto/sfregamento o nell'attività sessuale.


La vulvodinia è determinata da un'inflammatione cronica dei tessuti (epitelio) dei genitali esterni. Può essere causata da infezioni ripetute da cattive abitudini igieniche, ma a volte non ha cause scatenanti. Il problema specifico è che lo stato infiammatorio non regredisce, ma permane e si autoalimenta, progredendo fino ad alterazioni neurologiche definitive, una sensazione dolorosa non più regredibile per il danneggiamento delle microterminazioni nervose presenti. I sintomi della vulvodinia sono bruciore, irritazione, secchezza, sensazione di abrasione a livello vulvare, tensione, sensazione simile a punture di spillo, disepitelizzazione, percezione di avere tagli sulla mucosa e gonfiore. La **vulvodinia** si concentra spesso nella zona dell'intrito (vestibolo) in tal caso anche detta sindrome vulvovestibolare. La vulvodinia peggiora sensibilmente la qualità di vita e può condurre ad astinenza sessuale a causa di rapporti percepiti come spiacevoli e dolorosi (dispareunia) con progressiva perdita del desiderio sessuale.

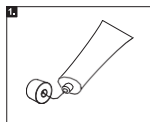


Svitare il tappo e forare il sigillo con il retro-tappo.

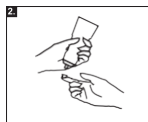

Premere nella direzione del dito della mano opposta depositando circa 1cm di gel.

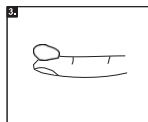

Depositare una quantità di gel pari a 2gr di prodotto.

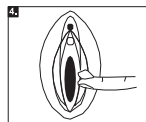

Applicare con breve massaggio sulla zona vulvare e lasciar assorbire per circa due minuti.



50 ml e FL OZ 1.69

51753867 Rev. 002 del 22/06/2023

Tixupharma Srl
Via Tuodde 56 - 20134 Milano, Italia
www.tixupharma.com

Tixupharma

Techdow Pharma Italy Srl
Centro Direzionale - Strada 1, Palazzo F4 - 20090 Assago Milanofiori (MI), Italia
www.techdow.it

Techdow

UBIGEL DONNA

Treatment of female genitourinary syndromes



What Ubigel is and how it works

Ubigel Donna is a medical device based on a hyaluronic acid and spermidine complex indicated in the treatment of female genitourinary syndromes. Hyaluronic acid is a physiological biopolymer made up of glycosaminoglycans typical of the extracellular matrix. By hydrating, it binds large quantities of water and, as such contributes to the integrity of epithelial-connective tissues. The complex releases spermidine in a "sustained" form such as to assist the physiological processes of renewal. Spermidine is an essential metabolite for physiology by regulating vital cellular processes. It is present in the genitourinary tissues, although it may represent a poor/limiting factor, where the exogenous contribution becomes therefore "restorative" of the physiological condition. The action of spermidine creates microenvironmental conditions of induced biostimulation on cellular mechanosensors. This mode of action evokes a positive micro-mechanical strain (thus comparable to a form of "soft" internal gym) which lead to the progressive vulvar, urethral and vaginal rehabilitation.

Intended use

Ubigel Donna improves and supports the genitourinary trophism with high bioadhesive capacity on tissues, forming a trophic film capable of supporting the recompaction of the epithelial and connective layers. Ubigel donna adheres to genitourinary tissues, progressively reducing the perceived discomfort. The nature of the product allows it to be used in association with treatments aimed at vaginal infections. To be used in case of:

- **Vulvodynia**

Instruction of use

Apply every other day for 4 weeks. After a week's break, resume with one application every 3 days for another 4 weeks. Suspend the application in case of early resolution of the symptoms. Occasional use with sporadic applications is recommended to maintain the benefits obtained at the end of the treatment.

Warnings

The product is intended for local use only, do not use for a different route of administration than that indicated in this leaflet. Do not use in pregnant women without first consulting a doctor. Do not use the product after the expiry date stated on the package. Do not use the tube if it is broken or damaged. Keep out of reach of children. Store at temperatures between 4°C and 30°C. After use, close the tube.

Contraindications and side effects

Known individual hypersensitivity to the components. In some cases, a tingling sensation (pricking) has been reported, which tends to disappear after the first applications.

Interactions

The product is compatible with normal latex condoms.

Ingredients

Water, spermidine-hyaluronate, benzyl alcohol, sodium benzoate, phenoxyethanol, citric acid.

Presentation


Tube: 50 ml e FL OZ 1.69

Indications and methods of use


In case of vulvodynia

Ubigel donna is indicated in vulvar symptoms of hypersensitivity and pain upon contact/rubbing or during sexual intercourse.


Vulvodynia is caused by chronic inflammation of the tissues (epithelium) of the external woman's genitalia. It can be caused by repeated infections or by poor hygiene habits, but sometimes it has no triggers. The specific issue refers to an inflammatory state that does not regress, which persists and self-feeds, progressing to definitive neurological alterations, a painful sensation that is no longer reversible due to damage to the nerve microterminations present. The symptoms of vulvodynia include burning, irritation, dryness, abrasive sensing in vulva, tension, pin prick sensation, de-epithelialization, perception of cuts on mucosa and swelling. **Vulvodynia** is often concentrated in the area of the introitus (vestibule), in this case also called vulvovestibular syndrome. Vulvodynia significantly worsens the quality of life and can lead to sexual abstinence due to intercourse perceived as unpleasant and painful (dyspareunia) with progressive loss of sexual desire.

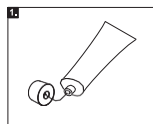


Unscrew the cap and pierce the seal with the back of the cap.

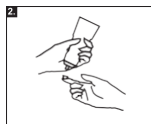

Press in the direction of the finger of the opposite hand depositing approximately 1 cm.

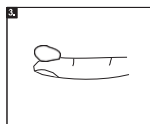

Deposit an amount of gel equal to 2 gr of product.

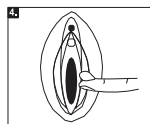

Apply with a short massage on the vulvar area and let it absorb for about two minutes.




Tixupharma Srl
Via Tuccide 56 - 20134 Milano, Italia
www.tixupharma.com

Tixupharma



Techdow Pharma Italy Srl
Centro Direzionale - Strada 1, Palazzo F4 - 20090 Assago Milanofori (MI), Italia
www.techdow.it

Techdow

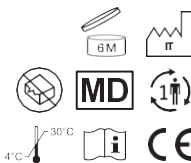

50 ml e FL OZ 1.69

51753867 Rev. 002 del 22/06/2023